

beurer

FC 40



RO Aparat pentru curățarea porilor
Instrucțiuni de utilizare





Citiți cu atenție prezentele instrucțiuni de utilizare, păstrați-le pentru consultarea ulterioară, puneți-le la dispoziția altor utilizatori și respectați indicațiile.

Cuprins

1. Prezentare	4
2. Explicația simbolurilor	4
3. Utilizarea conform destinației	5
4. Indicații de avertizare și de siguranță.....	5
5. Descrierea aparatului.....	7
5.1 Aparat.....	7
5.2 Accesorii.....	7
6. Utilizare	8
6.1 Efectuarea testului pielii	8
6.2 Încărcarea acumulatorului	8
6.3 A se avea în vedere înaintea utilizării.....	9
6.4 Utilizare.....	9
6.5 Domenii de utilizare.....	11
7. Curățare și întreținere	12
8. Piese de schimb și consumabile.....	12
9. Eliminarea ca deșeu	13
10. Date tehnice.....	13
11. Garanție/Service.....	14

Stimată clientă, stimat client,

Ne bucurăm că ați ales un produs din gama noastră. Marca noastră este sinonimă cu produse de calitate, testate riguros, din domenii precum căldură, terapie, tensiune/diagnosticare, greutate, masaj și aer. Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare și să respectați indicațiile.

Cu deosebită considerație,
Echipa dumneavoastră Beurer

Pachet de livrare

- 1 FC 40
- 1 accesoriu rotund (mare)
- 1 accesoriu rotund (mic)
- 1 accesoriu oval
- 10 filtre de schimb
- 2 inele de etanșare
- 1 capac filtru
- 1 cablu de încărcare USB
- 1 exemplar din prezentele instrucțiuni de utilizare



AVERTIZARE

- Aparatul este destinat exclusiv utilizării în gospodărie/ în mediul privat, nu în domeniul comercial.
- Acest aparat nu este adecvat pentru persoane sub 18 ani.
- Acest aparat poate fi utilizat de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau fără experiență și cunoștințe necesare numai dacă aceste persoane sunt supravegheate sau dacă au fost informate cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele care rezultă din aceasta.
- Copiilor nu le este permis să se joace cu aparatul.
- Lucrările de curățare și întreținere destinate utilizatorului nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.
- În cazul în care cablul de racordare la rețea al acestui aparat este deteriorat, acesta trebuie aruncat. Dacă acesta nu este detașabil, aparatul trebuie să fie eliminat.

1. Prezentare

Aparatul pentru curățarea porilor FC 40 permite curățarea în adâncime a porilor, datorită celei mai moderne tehnologii de vid. Cu ajutorul accesoriilor rotunde, coșurile, punctele negre și pielea moartă în exces se pot îndepărta în mod eficient. Aparatul pentru curățarea porilor dispune de un accesoriu oval, cu ajutorul căruia se poate obține o îmbunătățire a elasticității pielii și circulației sanguine la nivelul feței.

Aparatul pentru curățarea porilor dispune de un display LCD cu prezentare sistematică, pentru afișarea stării acumulatorului și a treptei de intensitate. Fiind dotat cu 5 trepte de intensitate, aparatul pentru curățarea porilor permite curățarea și îngrijirea individuală, în funcție de necesități.

2. Explicația simbolurilor

Următoarele simboluri apar în aceste instrucțiuni de utilizare și pe aparat:

	PERICOL Nu utilizați aparatul în apropierea apei sau în apă (de exemplu chiuvetă, duș, cadă) – pericol de electrocutare!
	AVERTIZARE Indicație de avertizare privind pericolele de vătămare sau pericolele pentru sănătatea dumneavoastră
	ATENȚIE Indicație de siguranță privind posibila defectare a aparatului/accesoriilor
	Indicație Indicație privind informații importante
	Respectați instrucțiunile de utilizare
	Curent continuu
	Eliminare în conformitate cu prevederile Directivei CE – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) privind deșeurile de echipamente electrice și electronice
	Producător

	A se utiliza exclusiv în spații închise
 	Eliminați ambalajul în mod ecologic

3. Utilizarea conform destinației

Utilizați aparatul exclusiv pe fața persoanelor adulte (exceptând zona mobilă a ochilor și a buzelor). Nu utilizați aparatul la animale!

Aparatul este destinat exclusiv uzului propriu, nu uzului medical sau comercial. Utilizați aparatul exclusiv în scopul pentru care a fost creat și în modul specificat în aceste instrucțiuni de utilizare. Utilizarea necorespunzătoare poate fi periculoasă! Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru defecțiuni cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau neglijență a aparatului. Nu utilizați aparatul dacă una sau mai multe indicații de avertizare și de siguranță menționate în cele ce urmează sunt aplicabile în cazul dumneavoastră. În cazul în care nu sunteți sigur(ă) dacă aparatul este potrivit pentru dumneavoastră, vă rugăm să vă consultați medicul.

4. Indicații de avertizare și de siguranță



AVERTIZARE

- Pericol de sufocare cu ambalajul! Nu lăsați ambalajul la îndemâna copiilor.
- Înainte de utilizare, verificați aparatul și accesoriile pentru identificarea defecțiunilor vizibile. În cazul în care aveți îndoieli, nu utilizați aparatul și adresați-vă comerciantului dumneavoastră sau serviciului pentru clienți, la adresa menționată.



AVERTIZARE

NU utilizați aparatul

- pe piele crăpată
- pe răni deschise
- în zona ochilor sau a gurii
- pe o altă parte a corpului în afară de față (exceptând zona ochilor și a gurii)

- în timpul sarcinii
- În cazul în care ați fost supus unei intervenții de chirurgie plastică la nivelul feței
- dacă suferiți de o afecțiune cardiacă
- dacă suferiți de afecțiuni ale pielii (de exemplu herpes, afecțiuni vasculare sau tumori ale pielii)
- dacă suferiți de cancer de piele
- dacă suferiți de iritații ale pielii
- direct după plajă sau dacă prezentați un eritem solar
- dacă luați medicamente care conțin steroizi
- dacă luați anticoagulante
- dacă suferiți de una dintre următoarele boli: scleroză multiplă, diabet sau boli autoimune.



ATENȚIE

Efectuarea lucrărilor de reparații la echipamentele electrice este permisă numai persoanelor de specialitate. Reparațiile efectuate în mod necorespunzător pot cauza pericole majore pentru utilizator. În cazul defectării sau deteriorării, aparatul trebuie reparat de către o firmă de specialitate autorizată.



AVERTIZARE

- Asigurați-vă că ștecărul și cablul de alimentare nu intră în contact cu apa, aburii sau alte lichide.
- Utilizați aparatul doar în spații interioare uscate (de exemplu, nu-l utilizați niciodată în cadă, la saună).
- Nu expuneți aparatul șocurilor și protejați-l împotriva căderii.
- Utilizați aparatul numai cu mâinile uscate.


Indicații privind manipularea acumulatorilor

- În cazul în care lichidul din celula acumulatorului intră în contact cu pielea sau ochii, clătiți locurile afectate cu apă și solicitați asistență medicală.
- Pericol de înghițire! Copiii mici pot înghiți acumulatorii și se pot asfixia. De aceea, nu păstrați acumulatorii la îndemâna copiilor mici!
- Protejați acumulatorii de căldura excesivă.
- Pericol de explozie! Nu aruncați acumulatorii în foc.
- Nu dezasamblați, deschideți sau rupeți acumulatorii.
- Utilizați numai aparatele de încărcare indicate în instrucțiunile de utilizare.

- Înainte de utilizare, acumulatorii trebuie încărcate corect. Pentru o încărcare corectă, trebuie să respectați întotdeauna indicațiile producătorului, respectiv informațiile din aceste instrucțiuni de utilizare.
- Înainte de prima punere în funcțiune, încărcați complet acumulatorul.
- Pentru a atinge cea mai lungă durată de viață posibilă a acumulatorului, încărcați acumulatorul complet de cel puțin 2 ori pe an.

5. Descrierea aparatului

5.1 Aparat

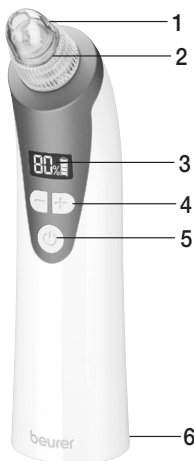

1. Accesorii

2. Cap de aspirație cu capac filtru

3. Afișajul intensității și al nivelului de încărcare al acumulatorului

4. Tasta -/+

Pentru setarea treptei de intensitate (20%, 40%, 60%, 80% sau 99%)

5. Tasta PORNIRE/OPRIRE

6. Port micro-USB

Pentru încărcarea acumulatorului cu cablul de încărcare micro USB

5.2 Accesorii



Accesoriu rotund (mare)

Adecvat pentru curățarea porilor pe suprafețe mari. Poate fi utilizat pe toată suprafața feței, cu excepția pielii din jurul ochilor.



Accesoriu rotund (mic)

Adecvat pentru curățarea porilor din suprafețe greu accesibile (de ex. la nivelul nasului). Poate fi utilizat pe toată suprafața feței, chiar și pe pielea sensibilă din jurul ochilor.



Accesoriu oval

Stimulează elasticitatea pielii și circulația sanguină la nivelul feței. Adecvat în special pentru utilizarea la nivelul nărilor și în jurul ochilor și gurii. Vă recomandăm să utilizați accesoriul oval la treapta de intensitate 1.

6. Utilizare

6.1 Efectuarea testului pielii

Cu 24 de ore înainte de utilizare efectuați un test al pielii cu aparatul. În acest scop, testați aparatul la cea mai mică treaptă de intensitate pe locurile mici, discrete ale pielii. În cazul în care după 24 de ore locul testat se înroșește sau dacă aveți dureri, nu mai utilizați aparatul.



ATENȚIE

Nu utilizați niciodată aparatul pe aceeași porțiune de piele pentru mai mult timp, pentru a evita apariția hematoamelor.

6.2 Încărcarea acumulatorului

Înainte de a pune prima dată în funcțiune aparatul, încărcați-l cel puțin 5 ore. Procedați după cum urmează:

- Conectați cablul de încărcare USB cu un adaptor de rețea adecvat (ieșire: 5V; 0,5A) și aparatul. Apoi conectați adaptorul de rețea la o priză corespunzătoare. Alternativ, puteți încărca aparatul și cu cablul de încărcare USB prin portul USB al computerului/laptop-ului dumneavoastră.

În timpul procesului de încărcare, afișajul nivelului de încărcare al acumulatorului indică starea actuală a acumulatorului. Imediat ce aparatul a fost încărcat complet, pe display apare . O încărcare completă a acumulatorului este suficientă pentru 90 de minute de funcționare (la cea mai înaltă treaptă de intensitate). Imediat ce afișajul nivelului de încărcare al acumulatorului  luminează intermitent, trebuie să încărcați din nou aparatul.

6.3 A se avea în vedere înaintea utilizării



Indicație

Înainte de utilizare, trebuie să aveți grijă ca pielea feței să fie curată, uscată și să nu prezinte urme de pudră, cremă sau machiaj.



AVERTIZARE

- Nu utilizați aparatul mai des de o dată pe săptămână.
- Direct după tratament, pielea tratată a feței poate prezenta o ușoară înroșire. Acest lucru este normal, iar roșeața va dispărea de la sine după cel mult 30 de minute.
- Înainte cu o zi și după, evitați efectuarea activităților de sudură, sauna, solarul sau expunerea la soare.
- După utilizare: Curățați-vă fața cu apă și feriți-o de soare.




Indicație


În cazul în care pielea nu este sensibilă, puteți utiliza aparatul chiar de 2 ori pe săptămână (cu cel puțin 48 de ore pauză între utilizări).

6.4 Utilizare


1. Printr-o mișcare de rotație, scoateți accesoriul din aparat și îndepărtați capacul de pe capul de aspirație.

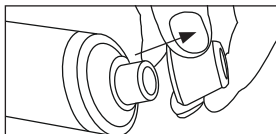


2. Așezați un filtru pe capul de aspirație și închideți-l din nou cu capacul. Aveți grijă ca filtrul să rămână uscat.

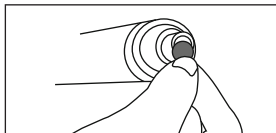


3. Așezați accesoriul dorit pe capul de aspirație.

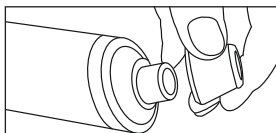

4. Pentru a porni aparatul apăsați tasta POR-NIRE/OPRIRE. Afișajul intensității și al nivelului de încărcare al acumulatorului începe să lumineze.

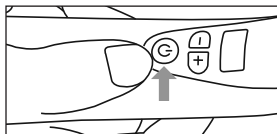

5. Alegeți cu tasta /+ treapta de intensitate dorită. Vă recomandăm ca, la prima utilizare, să începeți cu o treaptă de intensitate scăzută, pentru a vă obișnui treptat cu aparatul.

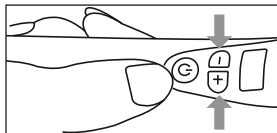


6. Mișcați accesoriul pe pielea de la nivelul feței. Aveți grijă să nu treceți de mai multe ori accesoriul peste o porțiune de piele a feței. Detalii suplimentare despre tratament găsiți în capitolul 6.3 „Domenii de utilizare”.


Indicație

Presiunea de utilizare trebuie să fie plăcută și nu trebuie să provoace dureri. După utilizare trebuie să se vadă o ușoară înroșire.

7. Pentru a încheia utilizarea, apăsați tasta POR-NIT/OPRIT. Afișajul intensității și al nivelului de încărcare al acumulatorului se stinge.

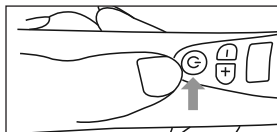

8. După fiecare utilizare, înlocuiți filtrul de unică folosință. În acest scop, trageți accesoriul în sus, printr-o mișcare de rotație și îndepărtați capacul de sub acesta. Îndepărtați filtrul cu ajutorul unei pensete.

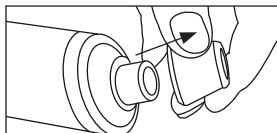

6.5 Domenii de utilizare


Indicație

Aveți grijă ca porțiunea feței care este tratată să fie întinsă, în timp ce mișcați aparatul pe piele. Acest lucru se obține în timp ce trageți cu mâna liberă în jos sau în lateral de piele pentru a o întinde.

Nu utilizați niciodată aparatul pe aceeași porțiune de piele pentru mai mult timp.

Frunte:

Mișcați încet și uniform aparatul din mijlocul frunții spre exterior. Aveți grijă ca o porțiune a pielii să nu fie tratată de mai multe ori.

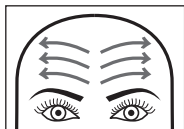

Tâmpile:

Mișcați aparatul spre exterior în direcția rădăcinii părului. Repetați acest proces pe partea stângă și dreaptă a nasului. Aveți grijă ca aparatul să se afle la o distanță de cel puțin 1 cm față de ochi.



Nas:

Mișcați aparatul de la podul superior al nasului în centru spre partea de jos. Repetați acest proces pe partea stângă și dreaptă a nasului.




Obraji:

Mișcați aparatul în exterior pe linia obrazilor.



În jurul gurii:

Mișcați aparatul în zona buzei superioare, din centru spre stânga și spre dreapta. Mișcați aparatul de la buza inferioară spre stânga și dreapta în sus. Aveți grijă să nu atingeți direct buzele!

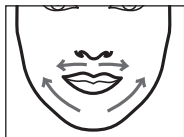

7. Curățare și întreținere

- Nu scufundați în niciun caz aparatul în apă sau alte lichide!
- Dezinfectați accesoriile după fiecare utilizare cu o soluție pentru dezinfectare disponibilă în comerț.
- După fiecare utilizare, înlocuiți filtrul de unică folosință.
- Dacă este murdar, curățați aparatul cu o cârpă uscată. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi.
- Protejați aparatul de șocuri, umezeală, praf, substanțe chimice, fluctuații puternice de temperatură și surse de căldură prea apropiate (cuptoare, radiatoare).

8. Piese de schimb și consumabile

Piese de schimb și consumabilele sunt disponibile la punctul de service de la adresa menționată (în lista cu adrese ale punctelor de service).

Indicați numărul de comandă corespunzător.

Piesă de schimb	Număr de articol, respectiv număr de comandă
10 filtre de schimb	164083
2 inele de etanșare	164084
Accesoriu rotund (mare)	164080
Accesoriu rotund (mic)	164081
Accesoriu oval	164082
Cablu de încărcare USB	164079
Capacul filtrului	164085

9. Eliminarea ca deșeu

În vederea protejării mediului înconjurător, aparatul nu trebuie eliminat la gunoiul menajer la finalul duratei de viață. Eliminarea se poate realiza prin intermediul centrelor de colectare corespunzătoare din țara dumneavoastră.



Eliminați aparatul conform prevederilor Directivei – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) privind aparatele electrice și electronice vechi. Pentru întrebări suplimentare, adresați-vă autorității locale responsabile pentru eliminarea deșeurilor.

10. Date tehnice

Alimentare	5V === 0,5A 3W
Dimensiuni	aprox. 172 x 46 x 42mm
<u>Acumulator:</u> Capacitate Tensiune nominală Tip	900mAh 3,7V Li-Ion
Greutate	~150g

11. Garanție/Service

În cazul obligațiilor de garanție, adresați-vă comerciantului local sau reprezentanței locale (a se vedea lista „Service internațional”).

La returnarea produsului, anexați o copie a bonului fiscal și o scurtă descriere a defectiunii.

Sunt valabile următoarele condiții de acordare a garanției:

1. Termenul de garanție pentru produsele BEURER este de 3 ani sau, în cazul în care este mai mare, este aplicabil termenul de garanție valabil de la data achiziționării din țara respectivă.
În cazul unei obligații de garanție, data achiziționării trebuie dovedită prin intermediul unui bon fiscal sau al unei facturi.
2. Efectuarea reparațiilor (la nivelul întregului produs sau al pieselor) nu duce la prelungirea termenului de garanție.
3. Garanția nu este valabilă în cazul defectiunilor cauzate de
 - a. utilizarea necorespunzătoare, de exemplu, nerespectarea instrucțiunilor de utilizare.
 - b. reparațiile sau modificările efectuate de către client sau de către o persoană neautorizată.
 - c. transportul de la producător la client sau în timpul transportului către centrul de service.
 - d. Garanția nu este valabilă pentru accesoriile care sunt supuse uzurii în mod obișnuit (manșetă, baterii etc.).
4. Este exclusă răspunderea pentru daunele directe sau indirecte cauzate de produs și în situația în care este recunoscută o obligație de garanție în asociere cu defectarea produsului.

