

beurer

FC 100



RO Pureo Derma Peel Microdermoabraziune
Instrucțiuni de utilizare

CE



Citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare, păstrați-le pentru consultarea ulterioară, puneți-le și la dispoziție altor utilizatori și respectați indicațiile.

Cuprins

1. Prezentare	3
2. Explicația simbolurilor	3
3. Utilizarea conform destinației	3
4. Indicații de avertizare și de sănătate	4
5. Descrierea aparatului	5
6. Utilizare	6
6.1 Efectuarea testului pielii	6
6.2 Utilizarea	6
6.3 Domenii de utilizare	7
7. Curățare și întreținere	8
8. Întrebări frecvente	8
9. Eliminarea ca deșeu	8
10. Date tehnice	8
11. Piese de schimb și consumabile	9

Pachet de livrare

- 1 stație de bază FC 100
- 1 aparat
- 1 accesoriu de precizie
- 1 accesoriu dur
- 1 accesoriu mare
- 20 x filtre de unică folosință
- 1 adaptor de rețea
- Aceste instrucțiuni de utilizare



AVERTIZARE

- Aparatul este destinat exclusiv utilizării în gospodărie/în mediul privat, nu în domeniul comercial.
- Acest aparat nu este adecvat pentru persoane sub 18 ani.
- Acest aparat poate fi utilizat de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau fără experiență și cunoștințe necesare numai dacă aceste persoane sunt supravegheate sau dacă au fost informate cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele care rezultă din aceasta.
- Copiilor nu le este permis să se joace cu aparatul.
- Lucrările de curățare și întreținere destinate utilizatorului nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.
- În cazul în care cablul de racordare la rețea al acestui aparat este deteriorat, acesta trebuie eliminat. Dacă acesta nu este detașabil, aparatul trebuie să fie eliminat.

Stimată clientă, stimate client,

Vă mulțumim că ați optat pentru unul dintre produsele noastre. Marca noastră simbolizează produse de calitate superioară, testate în detaliu, din domeniile căldură, terapie, tensiune/diagnosticare, greutate, masaj, frumusețe și aer. Citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare, păstrați-le pentru consultarea ulterioară, puneți-le la dispoziție altor utilizatori și respectați indicațiile.










Cu deosebită considerație,
Echipa dumneavoastră Beurer.

1. Prezentare

Pureo Derma Peel FC100 vă permite o exfoliere profesională a feței pe baza tehnicii de microdermoabraziune. Astfel cu ajutorul stratului din safir de calitate superioară, particulele de piele în exces sunt îndepărtate ușor, iar prin intermediul celei mai noi tehnici de vacuum aspectul pielii se îmbunătățește vizibil și se stimulează circulația sanguină. Suplimentar, se stimulează înnoirea celulelor, în timp ce pielea pare mai fină și mai strălucitoare.

2. Explicația simbolurilor

Următoarele simboluri apar în aceste instrucțiuni de utilizare și pe aparat:

	AVERTIZARE Indicație de avertizare privind pericolele de vătămare sau pericolele pentru sănătatea dumneavoastră
	ATENȚIE Indicație de siguranță privind posibile daune ale aparatului/accesoriilor
	PERICOL Nu utilizați aparatul în apropierea apei sau în apă (de exemplu chiuvetă, duș, cadă) – pericol de electrocutare!
	Indicație Indicație privind informații importante
	Țineți cont de instrucțiunile de utilizare
	Aparatul prezintă izolație dublă de protecție
	Eliminare în conformitate cu prevederile Directivei CE – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.
	Producător
	A se utiliza exclusiv în spații închise

3. Utilizarea conform destinației

Utilizați aparatul exclusiv pe fața persoanelor adulte (exceptând zona ochilor și a gurii). Nu utilizați aparatul la animale! Aparatul poate fi utilizat numai în scopul descris în prezentele instrucțiuni de utilizare. Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru defecțiunile produse ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau neglijente a aparatului.

4. Indicații de avertizare și de sănătate

AVERTIZARE

- Pericol de sufocare cu ambalajul! Nu lăsați ambalajul la îndemâna copiilor.
- Înainte de utilizare, verificați aparatul și accesoriile pentru identificarea defecțiunilor vizibile. În cazul în care aveți îndoieli, nu utilizați aparatul și adresați-vă comerciantului dumneavoastră sau serviciului pentru clienți.
- Nu apropiați adaptorul de rețea de apă.

PERICOL

Nu utilizați aparatul în apropierea apei sau în apă (de exemplu chiuvetă, duș, cadă) – pericol de electrocutare!

AVERTIZARE

NU utilizați aparatul

- pe piele crăpată.
- pe răni deschise.
- în zona ochilor sau a gurii.
- pe o altă parte a corpului în afară de față (exceptând zona ochilor și a gurii).
- dacă suferiți de afecțiuni ale pielii (de exemplu herpes, afecțiuni vasculare sau tumori ale pielii).
- dacă suferiți de cancer de piele.
- dacă suferiți iritații ale pielii.
- direct după plajă sau dacă prezentați un eritem solar.
- dacă luați medicamente care conțin steroizi.
- dacă luați anticoagulante,
- dacă suferiți de una dintre următoarele boli: scleroză multiplă, diabet sau boli autoimune.

AVERTIZARE

Din acest motiv, utilizați aparatul doar cu cablul de alimentare livrat și la tensiunea de rețea menționată pe acesta.


ATENȚIE

Efectuarea lucrărilor de reparații la echipamentele electrice este permisă numai persoanelor de specialitate. Reparațiile efectuate în mod necorespunzător pot cauza pericole majore pentru utilizator. În cazul defectării sau deteriorării, aparatul trebuie reparat de către o firmă de specialitate autorizată.

AVERTIZARE

- Utilizați aparatul doar în spații interioare uscate (de exemplu, nu-l utilizați niciodată în cadă, la saună).
- Nu băgați niciodată mâna după un aparat căzut în apă. Scoateți imediat adaptorul de rețea din priză.
- Nu expuneți aparatul șocurilor și nu-l lăsați să cadă.
- Nu blocați cablul de alimentare.
- Asigurați-vă că adaptorul de rețea și cablul de alimentare nu intră în contact cu apa, aburii sau alte lichide.

5. Descrierea aparatului

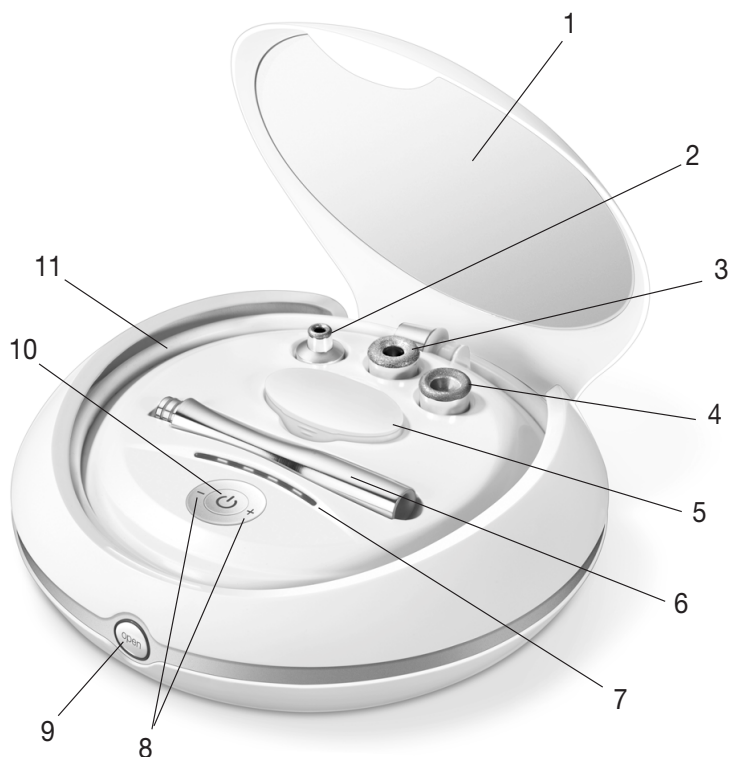

1. Oglindă	7. Afișaj al treptelor de intensitate (Nivel 1-5)
2. Accesoriu de precizie cu strat din safir fin, adecvat suprafețelor mici pentru tratamentul precis (de exemplu în zona nasului)	8. Taste +/- pentru setarea treptei de intensitate
3. Accesoriu mai mare cu strat din safir fin, adecvat pielii sensibile	9. Buton de deschidere
4. Accesoriu dur cu strat din safir dur, adecvat zonelor problemă pentru tratamentul intensiv	10. Tasta Pornire/Oprire
5. Geantă de depozitare cu filtru de unică folosință	11. Furtun
6. Aparat	

6. Utilizare

Indicație

Înainte de utilizare, trebuie să aveți grijă ca pielea feței să fie curată, uscată și să nu prezinte urme de pudră, cremă sau machiaj.

6.1 Efectuarea testului pielii

Cu 24 de ore înainte de utilizare efectuați un test al pielii cu aparatul. În acest scop, testați aparatul la cea mai mică treaptă de intensitate pe locurile mici, discrete ale pielii. În cazul în care după 24 de ore locul testat se înroșește sau dacă aveți dureri, nu mai utilizați aparatul.

AVERTIZARE

- Nu utilizați aparatul mai des de o dată pe săptămână.
- Direct după tratament, pielea tratată a feței poate prezenta o ușoară înroșire și în cazuri rare, ușoare echimoze.
- Înainte cu o zi și după, evitați efectuarea activităților de sudură, sauna, solarul sau expunerea la soare.


Indicație

În cazul în care pielea nu este sensibilă, puteți utiliza aparatul chiar de 2 ori pe săptămână (cu cel puțin 48 de ore pauză între utilizări).


6.2 Utilizarea

1. Închideți adaptorul de rețea de la nivelul aparatului și introduceți adaptorul de rețea în priză.


2. Apăsăți **butonul de deschidere** pentru a deschide aparatul.

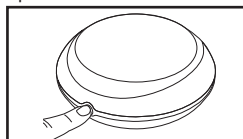


3. Așezați filtrul de unică folosință la capătul furtunului.

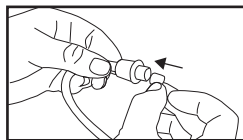

4. Conectați capătul furtunului cu aparatul.

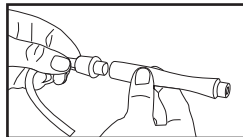

5. Așezați accesoriul dorit pe vârful aparatului.

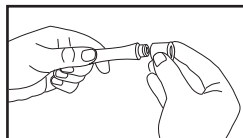

6. Pentru a porni aparatul acum, apăsați **tasta Pornire/Oprire**. Afișajul pentru treptele de intensitate începe să lumineze. Vă aflați deja la cea mai mică treaptă de intensitate.



7. Mai întâi începeți utilizarea la cea mai mică treaptă de intensitate. Așezați aparatul pe pielea feței și mișcați-l pe piele. Aveți grijă să nu treceți de mai multe ori peste o porțiune de piele a feței. Detalii suplimentare despre tratament găsiți în capitolul 6.3 „Domenii de utilizare”.

Dacă treapta cea mai mică de intensitate este prea slabă, o puteți schimba prin apăsarea **tastelor -/+**.




i Indicație

Presiunea de utilizare trebuie să fie plăcută și nu trebuie să provoace dureri. După utilizare trebuie să se vadă o ușoară înroșire.

8. După finalizarea utilizării, opriți aparatul prin apăsarea **tastei Pornire/Oprire** și scoateți adaptorul de rețea din priză.

9. După fiecare utilizare, înlocuiți filtrul de unică folosință. În acest scop, deconectați aparatul de la furtun. Îndepărtați filtrul de unică folosință cu ajutorul unei pensete.

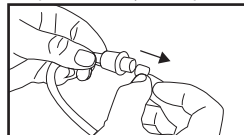

6.3 Domenii de utilizare

i Indicație

Aveți grijă ca porțiunea feței care este tratată să fie întinsă, în timp ce mișcați aparatul pe piele. Acest lucru se obține în timp ce trageți cu mâna liberă în jos sau în lateral de piele pentru a o întinde.

Frunte:

Mișcați încet și uniform aparatul din mijlocul frunții spre exterior. Aveți grijă ca o porțiune a pielii să nu fie tratată de mai multe ori.



Tâmples:

Mișcați aparatul spre exterior în direcția rădăcinii părului. Repetați acest proces pe partea stângă și dreaptă a nasului. Aveți grijă ca aparatul să se afle la o distanță de cel puțin 1 cm față de ochi.



Nas:

Mișcați aparatul de la podul superior al nasului în centru spre partea de jos. Repetați acest proces pe partea stângă și dreaptă a nasului.



Obraji:

Mișcați aparatul în exterior pe linia obrazilor.



În jurul gurii:

Mișcați aparatul în zona buzei superioare, din centru spre stânga și spre dreapta. Mișcați aparatul de la buza inferioară spre stânga și dreapta în sus. Aveți grijă să nu atingeți direct buzele!



7. Curățare și întreținere

- Nu scufundați în niciun caz aparatul în apă sau alte lichide!
- Dezinfectați accesoriile după fiecare utilizare cu o soluție pentru dezinfectare disponibilă în comerț.
- După fiecare utilizare, înlocuiți filtrul de unică folosință.
- Dacă este murdar, curățați aparatul cu o cârpă uscată. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi.
- Protejați aparatul de șocuri, umezeală, praf, substanțe chimice, fluctuații puternice de temperatură și de surse de căldură prea apropiate (cuptoare, radiatoare).

8. Întrebări frecvente

Pureo Derma Peel FC100 este adecvat pentru fiecare tip de piele?

Pureo Derma Peel FC100 este adecvat pentru toate tipurile de piele. Este adecvat deopotrivă pentru ten gras și uscat, cât și pentru ten mixt. De asemenea, este adecvat pentru toate culorile de piele.

Tehnologia integrată în Pureo Derma Peel FC100 este sigură?

Pureo Derma Peel FC100 funcționează pe baza tehnicii de microdermoabraziune. Astfel sunt îndepărtate doar particulele de piele în exces ale stratului de piele exterior, celelalte straturi de piele nu sunt afectate.

Utilizarea Pureo Derma Peel FC100 provoacă dureri?

Nu, utilizarea Pureo Derma Peel FC100 trebuie să fie ușoară și fără dureri. În cazuri rare, pielea foarte sensibilă poate manifesta o ușoară senzație de ardere. Cu toate acestea, dacă simțiți durere în timpul utilizării, reduceți intensitatea.

Cât durează un tratament cu Pureo Derma Peel FC100?

Durata unui tratament poate varia în funcție de zona tratată. Un tratament complet al feței durează cca. 20 de minute.

Cât de des trebuie să utilizez Pureo Derma Peel FC100?

Vă recomandăm să utilizați Pureo Derma Peel FC100 o dată pe săptămână și trebuie să așteptați cel puțin 48 de ore între tratamente. În cazul în care pielea nu este sensibilă, puteți utiliza aparatul chiar de 2 ori pe săptămână. Anterior este obligatorie testarea utilizării. După utilizare, protejați pielea de soare.

De ce anume trebuie să țineți cont după tratament?

Înainte de a vă expune la soare, în primele trei zile după un tratament, utilizați o cremă de protecție solară. În primele trei zile după un tratament NU efectuați exfolieri mecanice/chimice, electrolyze și epilări în zona feței și NU utilizați niciun agent de epilare. Puteți aplica produse de machiaj imediat după tratament.

9. Eliminarea ca deșeu

În vederea protejării mediului înconjurător, aparatul nu trebuie eliminat la gunoiul menajer la finalul duratei de viață. Eliminarea se poate realiza prin intermediul centrelor de colectare corespunzătoare din țara dumneavoastră. Eliminați aparatul conform prevederilor Directivei – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) privind aparatele electrice și electronice vechi. Pentru întrebări suplimentare, adresați-vă autorității locale responsabile pentru eliminarea deșeurilor.



10. Date tehnice

Alimentare cu tensiune alimentator	Intrare: 100-240V AC, 50/60 Hz Ieșire: 12V, 600mA
Dimensiuni	Ø 21,5 x 8,8 cm
Greutate	~869 g

11. Piese de schimb și consumabile

Puteți achiziționa piese de schimb și piese de uzură la departamentul de service folosind numărul de articol indicat.

Denumire	Număr de articol și număr de comandă
20 x filtre de unică folosință	163.546
Accesoriu de precizie	163.557
Accesoriu dur	163.556
Accesoriu mare	163.555

