



beurer

FC 59




RO Perie facială
Instrucțiuni de utilizare


CE

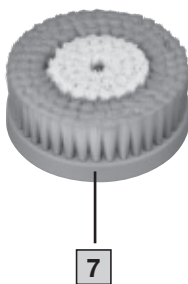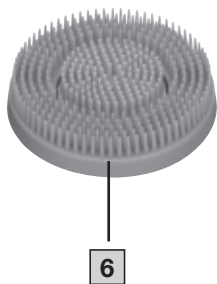

A

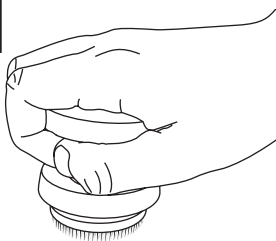

B

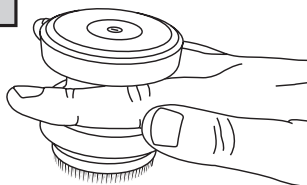



Citiți cu atenție prezentele instrucțiuni de utilizare. Respectați indicațiile de avertizare și de siguranță. Păstrați instrucțiunile de utilizare pentru consultarea ulterioară. Puneți instrucțiunile de utilizare la dispoziția altor utilizatori. La predarea aparatului, înmănați și instrucțiunile de utilizare.

CUPRINS

1. Pachet de livrare.....	3
2. Explicația simbolurilor	3
3. Utilizarea conform destinației.....	4
4. Indicații de avertizare și de siguranță.....	4
5. Descrierea aparatului.....	6
6. Utilizare.....	6
6.1 Punerea în funcțiune	6
6.2 Începerea utilizării	7
6.3 Blocarea tastelor	7
7. Curățarea și întreținerea	7
8. Accesorii și/sau piese de schimb.....	8
9. Ce este de făcut în cazul în care apar probleme?	8
10. Eliminarea ca deșeu	8
11. Date tehnice	9
12. Garanție.....	9

1. PACHET DE LIVRARE

Verificați pachetul de livrare pentru a vă asigura că starea ambalajului de carton este ireproșabilă și conținutul acestuia este complet. Înainte de utilizare, asigurați-vă că aparatul și accesoriile și/sau piesele de schimb nu prezintă defecțiuni vizibile și că sunt îndepărtate toate materialele de ambalare. Dacă aveți îndoieli, nu utilizați aparatul și adresați-vă comerciantului dumneavoastră sau serviciului pentru clienți, la adresa menționată.

- 1 aparat
- 1 accesoriu cu perie pentru exfoliere
- 1 accesoriu cu perie delicat
- 1 accesoriu cu perie din silikon
- 1 cablu de încărcare USB-C

2. EXPLICAȚIA SIMBOLURILOR

Pe aparat, în instrucțiunile de utilizare, pe ambalaj și pe plăcuța de identificare a aparatului sunt utilizate următoarele simboluri:

⚠️ AVERTIZARE

Denumeste un posibil pericol iminent. Dacă acesta nu este evitat, consecința poate fi decesul ori vătămări foarte grave.

⚠️ ATENȚIE

Denumeste un posibil pericol iminent. Dacă acesta nu este evitat, consecința poate fi vătămări ușoare ori minore.

INDICAȚIE

Denumiște o situație posibil periculoasă. Dacă nu este evitat, dispozitivul sau obiectele din jur pot fi deteriorate.



Informații privind produsul

Indicație privind informații importante



Citiți instrucțiunile



Dispozitivul (electric) nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere



Nu eliminați la gunoierul menajer baterii care conțin substanțe nocive



Producător



Marcaj CE

Acest produs îndeplinește cerințele directivelor europene și naționale în vigoare.



Separați produsul și componentele ambalajului și eliminați-le în conformitate cu reglementările locale.



Marcaj pentru identificarea materialului de ambalare.
A = Abrevierea pentru material,
B = Numărul materialului:
1-7 = Material plastic,
20-22 = Hârtie și carton



Dispozitiv din clasa de protecție II



S-a demonstrat că produsele îndeplinesc cerințele reglementărilor tehnice ale Uniunii Economice Eurasiatice (UEE).



Protecție împotriva scufundării temporare. Dispozitivul poate fi scufundat până la o adâncime de 1 metru timp de până la 30 de minute.



Poate fi utilizată în cadă sau sub duș



Curent continuu



USB-C



Marcaj de evaluare a conformității în Regatul Unit
Marca de conformitate pentru Regatul Unit



Simbolul Importator

3. UTILIZAREA CONFORM DESTINAȚIEI

Utilizați aparatul exclusiv pe fața umană (excepând zona ochilor și a gurii). Aparatul poate fi utilizat numai în scopul descris în prezentele instrucțiuni de utilizare. Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru defecțiunile rezultate ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau neglijente a aparatului.

4. INDICAȚII DE AVERTIZARE ȘI DE SIGURANȚĂ

⚠️ AVERTIZARE

- Pericol de sufocare cu ambalajul! Nu lăsați ambalajul la îndemâna copiilor.
- Înainte de utilizare, verificați aparatul și accesorii pentru identificarea defecțiunilor vizibile.
- Dacă aveți îndoieli, nu utilizați aparatul și adresați-vă comerciantului dumneavoastră

sau serviciului pentru clienți, la adresa menționată.

- Componenta ținută în mână trebuie decuplată de la cablul de conectare înainte de curățarea cu apă.
- Dacă folosiți aparatul în baie trebuie să scoateți ștecărul din priză după utilizare, deoarece apropierea față de apă reprezintă un pericol chiar dacă aparatul este oprit.
- Protejați aparatul împotriva acțiunii directe a razelor solare, căldurii extreme sau apei care fierbe.
- Evitați utilizarea agenților de curățare abrazivi, precum și a produselor de îngrijire pe bază de alumina sau silicon.
- Aparatul este destinat exclusiv utilizării în gospodărie/în mediul privat, nu în scop comercial.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii peste 8 ani și persoane cu capacitate fizică, senzorială sau mintală limitată sau fără experiență și cunoștințe necesare numai dacă sunt supravegheate sau dacă au fost informate cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele care rezultă din aceasta.
- Copiilor nu le este permis să se joace cu aparatul.
- Lucrările de curățare și întreținere destinate utilizatorului nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.
- În cazul în care cablul de racordare la rețea al acestui aparat este deteriorat, acesta trebuie eliminat.
- Nu sunteți autorizat în niciun caz să demontați sau să reparați aparatul, în caz contrar nefiind posibilă garantarea unei funcționări ireproșabile. În cazul nerespectării, pierdeți garanția.

AVERTIZARE

NU utilizați aparatul

- pe piele crăpată,
- pe răni deschise,
- dacă suferiți de afecțiuni sau iritații ale pielii,

- imediat după plajă,
- dacă luați medicamente care conțin steroizi.

ATENȚIE

Lucrările de reparație la nivelul echipamentelor electrice pot fi efectuate numai de persoane de specialitate. Reparațiile efectuate în mod necorespunzător pot reprezenta pericole majore pentru utilizator. În cazul defectării sau deteriorării, aparatul trebuie reparat de către un atelier de specialitate calificat.

INDICAȚIE

Indicații privind manipularea bateriilor

AVERTIZARE

- **Pericol de explozie! Pericol de incendiu!** Nerespectarea punctelor menționate poate duce la vătămări, supraîncălzire, scurgeri, aerisire, rupere, explozie sau foc.
- Pentru încărcare, utilizați întotdeauna cablul de încărcare/încărcătorul/alimentatorul corect sau furnizat.
- Evitați încărcarea permanentă sau supraîncărcarea. Scoateți ștecărul din priză atunci când este încărcat.
- A se utiliza numai cu adaptorul de rețea corespunzător.
- Încărcați dispozitivul sub supraveghere, acordând atenție generării de căldură, deformării și degazificării. În cazul în care aveți îndoieli întrerupeți procesul de încărcare.
- Eliminați ca deșeu bateriile/cablul de încărcare/încărcătorul defecte imediat în modul corespunzător (a se vedea capitolul 10 Eliminarea ca deșeu).
- Nu aruncați dispozitivul sau bateriile în foc.
- Nu descărcați forțat, nu încălziți, nu dezamblați, nu deschideți, nu rupeți, nu deformați, nu încapsulați, nu modificați și nu expuneți niciodată dispozitivul sau bateriile la șocuri.

- Nu scurtcircuitați niciodată bateriile și conexiunile dispozitivului operat cu baterii.
- Protejați dispozitivul sau bateriile de lumina directă a soarelui, ploaie, căldură și apă.
- Expunerea bateriilor la temperaturi foarte ridicate sau la presiuni extrem de scăzute ale aerului poate provoca explozii sau scurgeri de lichide și gaze inflamabile.
- În cazul în care lichidul dintr-o baterie intră în contact cu pielea sau ochii, clătiți locul afectat cu apă și solicitați asistență medicală.
- Nu utilizați baterii/cabluri de încărcare/încărcătoare modificate sau deteriorate.
- Alegeți întotdeauna tipul de baterie corect. Contactați serviciul pentru clienți dacă o baterie de schimb poate fi înlocuită.
- Introduceți întotdeauna bateriile corect, ținând cont de polaritatea acestora (+/-).
- Dacă una dintre baterii s-a scurs, puneți-vă mănuși de protecție și curățați compartimentul pentru baterii cu o cârpă uscată.
- **Pericol de înghițire!** Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor. În caz de înghițire, solicitați imediat asistență medicală. Înghițirea poate cauza arsuri interne grave și decesul.
- Nu lăsați niciodată copiii să schimbe bateriile dacă nu sunt supravegheați de un adult.

INDICAȚIE

- Informații privind scoaterea și/sau înlocuirea bateriei, pot fi găsite în capitolul 10 Eliminare sau pe pagina de pornire.
- Depozitați bateriile de schimb la distanță de obiecte din metal, în încăperi bine aerisite, uscate și răcite.
- Păstrați bateriile curate și uscate.
- Țineți bateriile la distanță de apă.

5. DESCRIEREA APARATULUI

Desenele aferente sunt ilustrate la pagina 2.

- 1 Tastă PORNIRE/OPRIRE
- 2 LED circular
- 3 Accesoriu cu perie
- 4 Mâner
- 5 Port USB-C
- 6 Accesoriu cu perie din silicon
- 7 Accesoriu cu perie pentru exfoliere
- 8 Accesoriu cu perie delicat

6. UTILIZARE

6.1 Punerea în funcțiune

Înainte de prima utilizare, trebuie să încărcați aparatul complet, timp de 90 de minute. Durata maximă de utilizare cu aparatul complet încărcat este de aprox. 50 de minute.

Procedați după cum urmează:

1. Conectați cablul de încărcare USB la portul USB-C **5** și la un adaptor de rețea (nu este inclus în pachetul de livrare).
2. Conectați adaptorul de rețea la o priză corespunzătoare. LED-ul circular **2** luminează intermitent alb în timpul procesului de încărcare.
3. Atașați accesoriul cu perie dorit la aparat. Dacă este necesar, rotiți-l cu atenție spre dreapta și spre stânga, până când se fixează sonor și vizibil.

INDICAȚIE

Aparatul nu poate fi utilizat în timpul procesului de încărcare.

4. Imediat ce LED-ul circular **2** luminează continuu alb, bateria este complet încărcată. După finalizarea procesului de încărcare, LED-ul circular **2** mai luminează încă 10 minute și apoi se stinge. Când deconectați cablul USB-C de la aparat, LED-ul circular **2**

se stinge și el. Aparatul este acum pregătit de funcționare.



Dacă durata de viață a bateriei este mai mică de 10 %, LED-ul circular [2] începe să lumineze intermitent roșu.

6.2 Începerea utilizării

⚠ ATENȚIE

În cazul în care apar leziuni ca urmare a folosirii periei faciale, întrerupeți imediat utilizarea și consultați medicul.

Pentru utilizare, puteți apuca aparatul cu mâna sau puteți așeza mânerul [4] între degetul arătător și degetul mijlociu (a se vedea figurile [A] și [B] de pe pagina pliantă 3).

1. Umeziți cu apă accesoriul cu perie atașat. Nu utilizați niciodată aparatul cu un accesoriu cu perie uscat, deoarece se poate irita pielea.
2. Aplicați gel de curățare pe pielea feței.
3. Pentru a porni aparatul, țineți apăsată pentru scurt timp tasta PORNIRE/OPRIRE [1]. LED-ul circular [2] luminează alb și accesoriul cu perie începe să se rotească.
4. Aparatul dispune de două setări de viteză. Pentru a comuta între setările de viteză, apăsați pentru scurt timp tasta PORNIRE/OPRIRE [1]. În setarea de viteză mai mare, LED-ul circular [2] luminează mai puternic.
5. Apropiati aparatul cu atenție de față și curățați pielea cu mișcări uniforme pentru a îndepărta reziduurile, impuritățile și celulele moarte.



Pentru a asigura un tratament plăcut, nu apăsați accesoriul cu perie rotativ prea tare pe piele. Tratați o regiune maximum 20 de secunde. Durata de utilizare recomandată pentru fiecare utilizare este de 1 minut. Aparatul se oprește în mod automat după 5 minute.

6. Opiți aparatul după tratament. Pentru a opri aparatul, apăsați tasta PORNIRE/OPRIRE [1] până când aparatul se oprește (apăsați de două ori treapta 1, apăsați o dată treapta 2). LED-ul circular [2] se stinge.
7. Clătiți fața cu multă apă pentru a îndepărta reziduurile de pe pielea dumneavoastră.
8. Tamponați fața cu un prosop pentru a o usca și aplicați apoi cu mișcări circulare uniforme o cremă hidratantă.

6.3 Blocarea tastelor



Aparatul dispune de o funcție de blocare a tastelor pentru a preveni pornirea accidentală a aparatului (de exemplu, atunci când se află în geamantan sau într-o geantă în timpul călătoriilor).

1. Pentru a activa funcția de blocare a tastelor, țineți apăsată tasta PORNIRE/OPRIRE [1] timp de 3 secunde. LED-ul circular [2] luminează intermitent de trei ori pentru confirmare.
2. Pentru a dezactiva funcția de blocare a tastelor, țineți apăsată din nou tasta PORNIRE/OPRIRE [1] timp de 3 secunde.

7. CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

INDICAȚIE

Înainte de a începe curățarea, trageți accesoriul pentru a-l detașa de aparat.

- După fiecare utilizare, curățați temeinic accesoriile cu apă.
- Nu curățați niciodată aparatul cu agenți de curățare care conțin alcool, benzină sau acetona.
- Curățați aparatul numai conform instrucțiunilor.
- Tamponați aparatul cu o cârpă care nu lasă scame.
- Aveți grijă să nu pătrundă apă în interiorul aparatului. În cazul în care se întâmplă

acest lucru, utilizați aparatul din nou abia când este complet uscat.

8. ACCESORII ȘI/SAU PIESE DE SCHIMB

Pentru a achiziționa accesorii și/sau piese de schimb, accesați www.beurer.com sau adresați-vă punctului de service din țara dumneavoastră (conform listei cu adrese ale punctelor de service). De asemenea, accesoriile și/sau piesele de schimb sunt disponibile și în comerț.

			
Tip de perie	Accessoriu cu perie pentru exfoliere	Accessoriu cu perie delicat	Accessoriu cu perie din silicon
Utilizare	Exfoliere săptămânală pentru îndepărtarea delicată a particulelor de piele în exces	Curățare zilnică delicată	Curățare zilnică
Tip de piele	Piele normală, piele mixtă, piele grasă	Piele sensibilă	Toate tipurile de piele
Înlocuire	După 4 luni	După 4 luni	După 6 luni
Număr articol	110.187	110.186	110.185

9. CE ESTE DE FĂCUT ÎN CAZUL ÎN CARE APAR PROBLEME?

Problemă	Remediere
Aparatul nu poate fi pornit	Asigurați-vă că tasta PORNIRE/OPRIRE este apăsată lung și suficient de bine la pornire. Încărcați aparatul conform descrierilor din instrucțiunile de utilizare. Dacă aparatul tot nu poate fi pornit, contactați serviciul pentru clienți.
Aparatul nu mai curăță atât de bine ca la început	Peria este uzată. Înlocuiți peria. Dacă nu mai aveți perii de schimb, le puteți comanda (consultați „Accesorii și/sau piese de schimb”).

10. ELIMINAREA CA DEȘEU

Pentru protejarea mediului înconjurător, aparatul nu trebuie eliminat la gunoii menajer la finalul duratei de viață. Eliminarea ca deșeu se poate realiza prin intermediul centrelor de colectare corespunzătoare din țara dumneavoastră. Respectați dispozițiile locale privind eliminarea ca deșeu a materialelor. Eliminați aparatul ca deșeu conform prevederilor Directivei CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Pentru întrebări suplimentare, adresați-vă autorității locale responsabile cu eliminarea deșeurilor. Puteți obține informații despre centrele de colectare a deșeurilor de echipamente, de exemplu, de la administrația locală, de la firmele locale de salubritate sau de la comerciantul dumneavoastră.



Bateriile uzate, complet goale trebuie eliminate în recipiente de colectare special marcate, la firmele specializate sau la comerciantul de echipamente electrice. Aveți obligația legală de a elimina bateriile ca deșeu.

Bateriile care conțin substanțe toxice prezintă aceste simboluri:


Pb = bateria conține plumb,
Cd = bateria conține cadmiu,
Hg = bateria conține mercur.



Eliminare ca deșeu ecologică

În scopul protejării mediului înconjurător, vă recomandăm să eliminați separat componentele individuale, în special bateriile.

1. Deșurbați șurubul de la portul USB-C cu o șurubelniță adecvată.
2. Desfaceți capacul superior în sensul acelor de ceasornic și scoateți-l în sus apăsând tasta.
3. Trageți capacul pentru apă în sus.
4. Deconectați conexiunea bateriei.
5. Scoateți bateria în sus și eliminați-o separat ca deșeu.

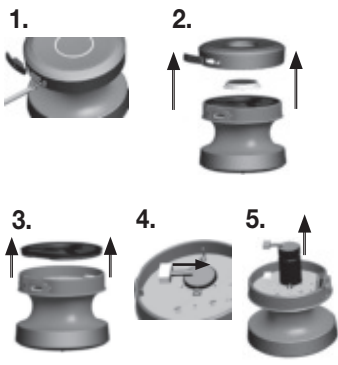

11. DATE TEHNICE

Intrare aparat	5,0 V --- 1,0 A; 5,0 W
Dimensiuni	<u>Aparat:</u> Diametru 60 mm Înălțime cu accesoriu cu perie din silicon: 60 mm Înălțime cu accesoriu cu perie pentru exfoliere și delicat: 67 mm <u>Accesorii cu perie</u> Silicon: diametru 48 mm și înălțime 13 mm Exfoliere și delicat: diametru 47 mm și înălțime 20 mm
Greutate	Aparat: 89 g Accesoriu cu perie din silicon: 11 g Accesoriu cu perie pentru exfoliere/delicat: 14 g
<u>Acumulator:</u> Capacitate Tensiune nominală Denumirea tipului	350 mAh 3,7 V Baterie litiu-ion

12. GARANȚIE

Pentru informații suplimentare privind garanția și condițiile de garanție, consultați broșura de garanție inclusă în pachetul de livrare.



Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Germany
www.beurer.com • www.beurer-healthguide.com

